


TRI HAWK CANADA

Talon Surgical* Хирургический Талон



Classic Talon** Классический Талон

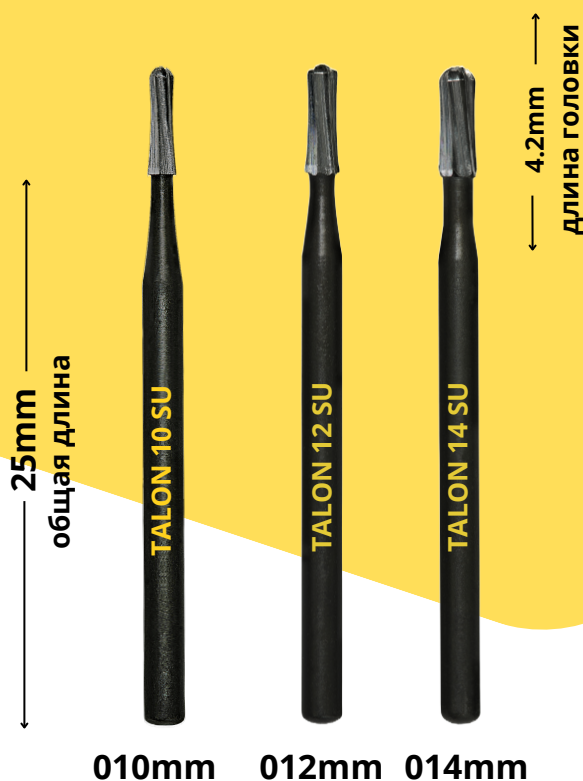

Область применения

*

1. При атравматичном удалении моляров — для полного распиливания коронковой части и проведения гемисекции корней зуба с последующим извлечением каждого корня по своей оси.
2. Резекция ретенированных восьмерок.
3. Удаление шляпки зализанного винта в шахте импланта.
4. Удаление коронок, литых штифтов.

**

1. Режет больше 8 коронок, как металл, так и керамику!
2. Удаление амальгамы, литых вкладок, титановых штифтов и т.д.
3. Редукция окклюзии зубов.
4. Первичная подготовка зуба для препарирования под коронку (быстрое и грубое удаление эмали и дентина).

Почему Talon режет быстрее других боров?

Гиперболическая конструкция Talon («форма песочных часов») совершенно уникальна на стоматологическом рынке. Вместо того, чтобы сделать бор прямым цилиндром с круглым концом, мы добавили специальный изгиб к форме бора. Этот изгиб увеличивает скорость резки и предотвращает засорение лезвий, что обеспечивает плавность резки и стабильную скорость вращения. Tri Hawk также использует уникальную смесь карбида вольфрама (WiDia), которая позволяет нам изготавливать более острые и долговечные лезвия, чем у любых других производителей. В серии TALON используются 6 острых центрически расположенных лезвий специальной лазерной заточки (без зазубрин), тогда как все остальные производители предлагают боры с поперечной насечкой (маленькие пилообразные зубья). Боры с поперечной насечкой тупятся быстрее, потому что маленькие зубья часто ломаются, уменьшая площадь поверхности рабочей части и нарушая равновесие, которое ведет к поломке бора.

Можно ли металлокерамическую коронку резать одним бором? Ответ – Да!

В отличие от других боров, где керамика снимается алмазным бором, а металл режется твердосплавным бором, с бором Talon, вы можете эту процедуру сделать одним бором, что экономит ваше время и деньги.

Как мне получить такие же результаты, как вы показываете в своих видео?

У всех наших видео есть одна общая черта: секрет в том, чтобы наклонить бор под углом 30°, как кончик карандаша, что позволяет резать твердые материалы, словно горячий нож по маслу. Убедитесь, что ваш наконечник в хорошем состоянии, и НЕ ОКАЗЫВАЙТЕ НИКАКОГО ДАВЛЕНИЯ... Talon сделает всю работу за вас!

Всегда начинайте там, где минимальный слой керамики (пришеечная часть). Начиная под углом 30 градусов, попытайтесь снять первый слой керамики, дальше, как зацепились за металл, плавными продольно-прерывистыми движениями продолжайте резку под углом 30 градусов и металла, и керамики вместе. Никакого давления!



Может ли Talon: а) резать полудрагоценные металлы? б) резать титановые штифты? в) использоваться для резки дентина, т. е. препарирования полости?

Бор Talon может резать любой материал, используемый в стоматологической промышленности, за исключением сверхтвердой керамики, такой как цирконий и литиевые дисиликаты. Материалы, которые Talon ест на обед, включают: драгоценные и недрагоценные металлы, любые металлические сплавы, амальгаму, титан, фарфор, эмаль и, конечно же, дентин.

Сможет ли Talon прорезать цирконий/eMax? Короткий ответ: Нет.

Хотя многие стоматологи нам пишут, что они настолько классные, что режут и цирконий, производитель настоятельно рекомендует не использовать их для резки циркония.

Наши алмазы X-Series 198-018XC и 141-014XC изготовлены из 100% натурального алмаза. Крупные частицы EXTRA в сочетании с нашей прочной и стабильной связкой обеспечивают вам быстрорежущий бор, который прослужит долго

Zirconium cutter

Резка циркония



141-014XC 198-018XC

Какой наконечник мне следует использовать: повышающий наконечник на электрическом микромоторе или турбинный?

У каждой клиники и стоматолога будут свои предпочтения. Наши боры отлично работают как с турбинными, так и с повышающими наконечниками на микромоторе. В ходе наших обширных испытаний мы обнаружили, что наши боры лучше всего работают с повышающими наконечниками на микромоторе с красным кольцом 1:5. Преимущество такого наконечника в том, что он имеет более высокий крутящий момент, что означает, что скорость вращения снижается значительно меньше при контакте. Очень важно отметить, что с борами Tri Hawk чем меньше вы нажимаете, тем лучше работает бор. ПУСТЬ БОР ДЕЛАЕТ РАБОТУ ЗА ВАС! Большинство стоматологов используют для черной работы (удаление коронок) простые наконечники, так как работая с другими борами для разрезания, приходится прикладывать усилия (давление), что очень негативно, как для дорогих турбинных наконечников, так и для повышающих наконечников. С борами Талон, никакого давления при резке коронок, что делает работу более комфортной с любимым наконечником, будь то (Bien Air, Kavo, Sirona, W&H, NSK), и при этом не влияя на долговечность службы дорогих наконечников, что опять экономит ваши средства.

С какой скоростью следует использовать наконечник?

Производитель рекомендует использовать повышающий наконечник 200 000 оборотов при отсутствии повышающего наконечника можно использовать турбинный наконечник, также на самых высоких оборотах.

Ваши боры ломаются? Это большая проблема с твердосплавными борами.

Наша цель — сделать неразрушимый бор! Чтобы достичь этого, мы выводим стандарты ISO на новый уровень. Наши боры подвергаются воздействию сил, в 5 раз превышающих указанные ISO. Мы также проводим до 10 тестов контроля качества, чтобы убедиться, что готовый упакованный бор — это лучшее, что мы можем произвести

Что делает Talon прочнее? Почему ваши боры прочнее?

Talon, как и все наши боры, изготовлен из специально разработанной смеси карбида вольфрама, которая увеличивает прочность бора и обеспечивает почти идеальное соединение во время нашего инновационного процесса сварки. Tri Hawk имеет специфичные конструкции хвостовика, головки и лезвия, поэтому от начала до конца вы получаете уникальный бор, который достаточно прочен для любой работы.

Где вы производите боры Tri Hawk?

Наше производство находится в Канаде — мы не импортируем из Китая. Наши рабочие не только высококвалифицированы, они также прошли обучение с упором на совершенство и качество. В качестве сырья мы используем высококачественный металл из Швейцарии и полный цикл производства боров осуществляется в Канаде.

Есть ли у вас какая-либо документация/тесты, подтверждающие качество вашей продукции?

Да, у нас есть сотни отзывов клиентов, исследование ADA 2006, Dental Advisor 2008 и Dental Product Shopper 2011, CRA декабрь 2015. Мы также сертифицированы по ISO 13485, FDA, CMDCAS (Канада), CE (Европа), ГОСТ (Россия) и ANVISA (Бразилия). И мы выводим эти строгие требования на новый уровень, чтобы убедиться, что все наши продукты являются абсолютно лучшими, прежде чем они покинут наши двери.

Сколько раз я могу использовать ваши боры?

Мы настоятельно рекомендуем использовать все боры для одного пациента. Для этого есть много причин: радикальное снижение количества поломок, отсутствие потерь рабочего времени персонала на длительный процесс стерилизации, устранение перекрестного заражения, И ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ САМЫЙ БЫСТРЫЙ, САМЫЙ ЧИСТЫЙ РЕЖУЩИЙ БОР КАЖДЫЙ РАЗ. Фактически, после однократного использования и процесса стерилизации (т. е. очистки, раствора, автоклава) бор теряет 20-40% своей режущей эффективности и увеличивает вероятность поломки — не только с нашими борами, но и со ВСЕМИ борами.

**С видеоматериалами вы можете ознакомиться на официальном сайте
производителя www.tri-hawk.ru**